



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni **SE** Bruksanvisning för Cricath® Adult **IN** Instructie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanviesing Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruiksaanviesing Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Bruksanvisning för Cricath Adult

Namn International Emergency Services S.L.



Produktnamn	Cricath® Adult	Steril	STERILE EO
Produktlogotyp		Engångsprodukt	
ID =	2.0 mm	Se bruksanvisning	
Innerdiameter		Innehåller inte rågummilatex	
Längd	7 cm		
Produktnummer	REF		

Användare

Cricath Adult måste användas av, eller under övervakning av, sjukvårdspersonal som utbildats för och har erfarenhet av luftvägsgrepp.

Avsedd användning

Cricath Adult är avsedd för att ge tillträde till luftstrupen då konventionell intubation med mask och/eller grov endotrakealtub inte kan användas på vuxna patienter.

Patientgrupp

Vuxna

Kontraindikationer

Inga kända

Potentiella komplikationer

- Blödning
- Hematom
- Rubbning av kateter
- Subkutant emfysem
- Mediastinalt emfysem
- Punktering av matstruben

Produktbeskrivning

Cricath Adult är en kateter för koniotomi med en längd på 7 cm och en innerdiameter på 2.0 mm och som är uppträdd på en 1.8 mm nål.

Förpackning

- Förpackningen innehåller Cricath Adult, inklusive spruta och halsrem.
- Förpackningen kan enkelt rivas upp och har steriliserats med hjälp av etylenoxid.
- Cricath Adult är steril så länge som förpackningen är oskadad och öppnad. Använd inte Cricath Adult om det nns någon misstanke om att förpackningen har skadats.
- Förvara den förpackade produkten på en torr plats.
- Undvik utdragen exponering för ljus.

Bruksanvisning för Cricath Adult

Ytterligare material som krävs


- Sterilt vatten
- Ventilationsenhet med han-luerfattning (t.ex. Ventrain®)

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd Cricath Adult endast i kombination med ventilatorer som fungerar ordentligt när de är anslutna till en nkalibrig kateter, till exempel Ventrain. Se ventilationsenhetens bruksanvisning.
- Fäst Cricath Adult ordentligt under användningen för att hålla katetern på plats i luftstrupen under hela användningen.
- För inte in nålen i katetern igen efter att nålen har dragits ut. Det kan skada eller punktera kateterväggen.
- Om möjligt och tillämpligt bör aseptisk teknik och lokalbedövning användas.

Bruksanvisning

- 1 Avlägsna skyddsröret från katetern, fyll sprutan med sterilt vatten eller saltlösning och fäst den vid katetern.
- 2 Förbered främre delen av halsen på patienten.
- 3 Identi era membrana krikothyroidea (som nns mellan struphuvudets ringbrosk och sköldbrosk) genom palpation (*Figur A* och *A**).
- 4 Håll luftstrupen stilla mellan tummen och pek ngret.
- 5 Håll katetern i den transparenta nålanslutningen eller den vattenfyllda sprutan.
- 6 För in kateterspetsen genom punktering av membrana krikothyroidea med nålspetsen (*Figur A* och *A**). När luftstrupen nås känns ett minskat motstånd.

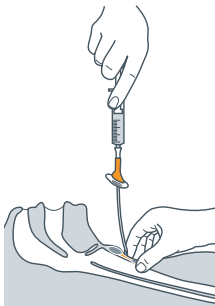


Figur A




Membrana krikothyroidea

Figur A*

- 7 Dra ut kolven på sprutan för att bekräfta att katetern har nått luftstrupen (Figur B). Luft ska fylla sprutan.
- 8 För försiktigt in endast katetern i luftstrupen tills änsen vilar mot halsen (Figur C).

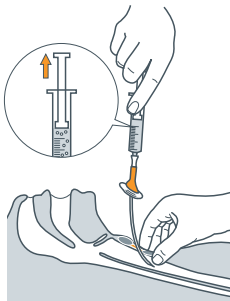

Figur B

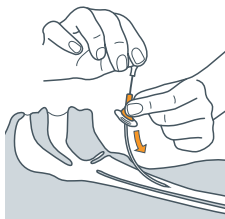

Figur C

Bruksanvisning för Cricath Adult

- 9 Avlägsna sedan nålen (*Figur D*). För inte in nålen i katetern igen efter att nålen har dragits ut. Det kan skada eller punktera kateterväggen.
- 10 Fäst sprutan vid katetern och aspirera på nytt för att bekräfta kateterns position.
- 11 Fäst katetern med den medföljande remmen eller på annat önskat och säkert sätt (*Figur E*).




Figur D



Figur E

- 12 Anslut en lämplig ventilationsenhet (t.ex. Ventrain) på katetern (*Figur F*).

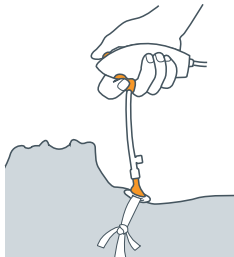

Figur F



EN Instructions for use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **www.ventinovamedical.com** NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult
Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult



IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com