



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni p**TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções
Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruksinstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Cricath Adult kullanma talimatları

İsim International Emergency Services S.L.



Ürün adı	Cricath® Adult	Steril	STERILE EO
Ürün logosu		Tek Kullanımlık	
İç çap	2.0 mm	Kullanma talimatlarına bakın	
Uzunluk	7 cm		
Ürün numarası	REF	Doğal kauçuk lateks içermez	

Operatör

Cricath Adult havayolu yönetimi konusunda eğitim almış ve deneyimli personel tarafından veya böyle bir personelin gözetimi altında uygulanmalıdır.

Kullanım amacı

Cricath Adult yetişkin hastalarda maske ve/veya geniş çaplı endotrakeal tüp ile konvansiyonel intübasyon uygulanamadığında trakeaya erişmek için kullanılır.

Hasta grubu

Yetişkinler

Kontra endikasyonları

Bilinen yok

Potansiyel komplikasyonlar

- Kanama
- Hematoma
- Kateterin yerinden çıkması
- Doku Amfizemi Pnömomedyasten
- Yemek borusu delinmesi

Ürün açıklaması

Cricath Adult 1.8 mm iğne ile uygulanan 7 cm uzunluğunda ve 2.0 mm iç çapında krikotiroidotomi kateteridir.

Ambalaj

- Ambalajın içinde şırınga ve boyun askısı ile birlikte Cricath Adult bulunur.
- Etilen oksit ile steril edilmiştir ve yırtılarak açılan ambalaj içindedir.
- Ambalaj hasar görmedikçe veya açılmadıkça Cricath Adult sterilidir. Ambalajın hasarsızlığı konusunda şüphemiz varsa Cricath Adult'ı kullanmayın.
- Ambalajlı ürünü oda sıcaklığında, kuru bir yerde muhafaza edin.
- Işığa uzun süre maruz kalmasından kaçının.

Gerekli ilave malzeme

- Steril su
- Erkek Luer konektöre sahip solunum cihazı (örn. Ventrain)

Uyarılar ve önlemler


- Cricath Adult ufak çaplı kateterlerle düzgün çalışan ventilatörler ile birlikte kullanılmalıdır, örneğin Ventrain. Lütfen ventilatörün kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Cricath Adult kullanma talimatları

- Kateteri trakea içinde sürekli olarak doğru pozisyonda tutmak için Cricath Adult'ı sıkıca sabitleyin.
- İğne bir kez geri çekildiğinde, iğneyi katetere tekrar sokmayın. Kateter duvarına hasar verebilir veya delebilir.
- Eğer mümkün ve uygun ise, aseptik tekniği ve lokal anestetik uygulanmalıdır.

Kullanma talimatları

- 1 Kateterin koruyucu tüpünü çıkartın, şırıngayı steril su veya salin ile doldurun ve katetere takın.
- 2 Hastanın boynunun ön kısmını hazırlayın.
- 3 Krikoid ve troid kıkırdak arasındaki krikoid membranı dokunarak bulun (şekil A ve A*).
- 4 Trakeayı baş parmak ve işaret parmağı arasında sabitleyin.
- 5 Kateteri şeffaf iğne göbeği veya su dolu şırıngadan tutun.
- 6 İğnenin ucu ile krikotrioid membranı delerek kateteri içeri yerleştirin (şekil A ve A*). Trakeaya girerken direnç kaybı hissedilebilir.

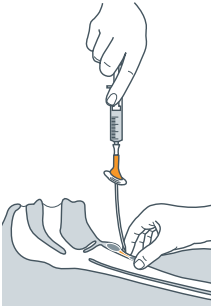


şekil A




Krikotrioid membran

şekil A*

- 7 Kateterin trakea içindeki pozisyonunu doğrulamak için şırınganın pistonunu çekin (şekil B). Hava aspire olmalıdır.
- 8 Flanş boyna yaslanıncaya kadar sadece kateteri trakea içinde dikkatle ilerletin (şekil C).

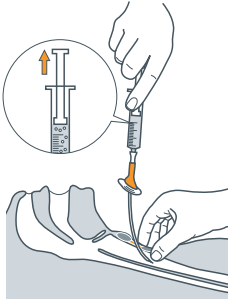

şekil B

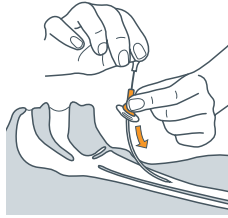

şekil C

- 9 Sonra, iğneyi çıkartın (şekil D). İğne çıkartıldıktan sonra tekrar kateterin içine yerleştirmeyiniz. Kateter duvarını delebilir veya hasar verebilir.
- 10 Şırıngayı katetere takın ve kateterin pozisyonunu doğrulamak için tekrar aspire edin.
- 11 Kateteri ürünle birlikte verilen boyun askısı veya diğer yollarla sabitleyin (şekil E).
- 12 Katetere uygun bir solunum cihaz (örn. Ventrain) bağlayın (şekil F).


Cricath Adult kullanma talimatları



şekil D



şekil E

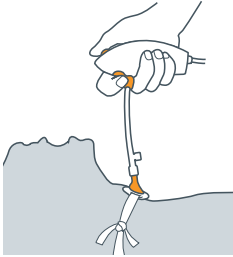

şekil F



EN Instructions for use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **www.ventinovamedical.com** NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult
Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult



IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com