



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni **DA** Brugsanvisning for Cricath® Adult **IN** Instructie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Brugsanvisning for Cricath Adult

Navn International Emergency Services S.L.



Produktnavn	Cricath® Adult	Steril	STERILE EO
Produktlogo		Engangsbrug	
ID =	2,0 mm	Se anvendelses	
Indvendig diameter		instruktioner	
Længde	7 cm	Indeholder ikke naturlig gummilatex	
Produktnummer	REF		

Læs brugsanvisningen før brug af produktet. Se produktets website www.ventinovamedical.com/products/cricath for flere oplysninger og kursusmateriale vedrørende dette produkt.

Operatør

Cricath Adult må kun benyttes af eller under supervision af lægefagligt personale, der har modtaget undervisning i og har erfaring med luftvejsadministration.

Anvendelsesformål

Cricath Adult er beregnet til at få adgang til luftrøret, når traditionel intubering ved hjælp af maske og/eller endotrakealslange med stort hul ikke kan udføres hos voksne patienter.

Patientgruppe

Voksne

Kontraindikationer

Ingen kendt

Potentielle komplikationer

- Blødning
- Hæmatom
- Kateterløsrivelse
- Vævsemfysem
- Pneumomediastinum
- Oesophageal punktering

Produktbeskrivelse

Cricath Adult er et cricothyrotomi-kateter med en længde på 7 cm og en indvendig diameter på 2,0 mm, indført over en 1,8 mm kanyle.

Emballering

- Emballagen indeholder Cricath Adult inklusive en sprøjte og halsrem.
- Den er emballeret i en pakke, der er blevet steriliseret ved brug af ætylenoxid, og som kan åbnes manuelt.
- Cricath Adult er steril, så længe emballagen er ubeskadiget og uåbnet. Brug ikke Cricath Adult, hvis der hersker tvivl om, at emballagen er intakt.

Brugsanvisning for Cricath Adult

- Opbevar det emballerede produkt på et tørt sted.
- Undgå længere tids eksponering over for lys.

Nødvendigt supplerende materiale


- Sterilt vand
- Ventilationsenhed med han-Luer-stik (f.eks. Ventrain®)

Advarsler og forholdsregler

- Brug kun Cricath Adult i kombination med ventilatorer, der fungerer korrekt, når de er tilsluttet et kateter med lille hul, for eksempel Ventrain. Se brugsanvisningen til ventilationsenheden.
- Fastgør Cricath Adult grundigt under brug for at holde kateteret på plads i luftrøret hele tiden.
- Isæt ikke kanylen i kateteret igen, når kanylen er trukket tilbage. Det kan beskadige eller punktere katetervæggen.
- Hvis det er muligt og passende, bør aseptisk teknik og lokalbedøvelse anvendes.

Anvendelsesinstruktioner

- 1 Fjern beskyttelsesslange fra kateteret, fyld sprøjten med sterilt vand eller saltvand, og fastgør den til kateteret.
- 2 Klargør patientens hals anteriort.
- 3 Identificér cricothyroidmembranen, der er placeret mellem ringbrusk og skjoldbrusk, ved palpation (*Figur A* og *A**).
- 4 Stabiliser luftrøret mellem tommelfinger og pegefinger.
- 5 Hold kateteret på det gennemsigtige kanylenav eller den vandfyldte sprøjte.
- 6 Indsæt kateteret kaudalt ved at punktere cricothyroidmembranen med kanylens spids (*Figur A* og *A**). Når man går ind i luftrøret, kan det mærkes, at modstanden forsvinder.

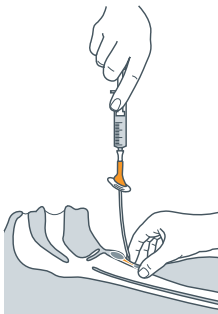


Figur A




Cricothyroidmembran

Figur A*

- 7 Træk i sprøjtes stempel for at bekræfte kateterpositionen i luftrøret (Figur B). Luft skal aspireres.
- 8 Før forsigtigt kun kateteret ind i luftrøret kaudalt, indtil flangen hviler på halsen (Figur C).

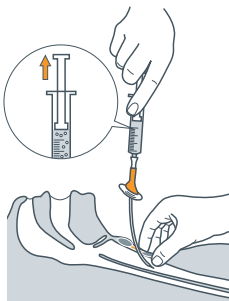

Figur B

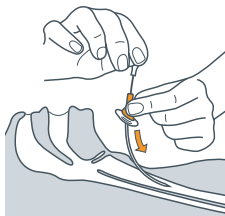

Figur C

Brugsanvisning for Cricath Adult

- 9 Fjern derefter kanylen (*Figur D*). Isæt ikke kanylen i kateteret igen, når kanylen er trukket tilbage. Det kan beskadige eller punktere katetervæggen.
- 10 Fastgør sprøjten til kateteret, og aspirer igen for at bekræfte kateterets placering.
- 11 Fastgør kateteret med den medfølgende rem eller andre midler (*Figur E*).




Figur D



Figur E

- 12 Tilslut en passende ventilationsenhed (f.eks. Ventrain) til kateteret (*Figur F*).

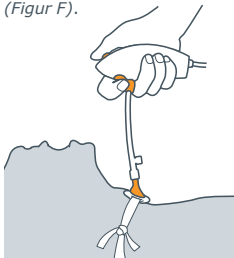

Figur F



EN Instructions for use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **www.ventinovamedical.com** NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult
Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult



IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com