



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni p**DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanstructie Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruiksaanstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Cricath Adult Bedienungsanleitung

Name International Emergency Services S.L.



Produktname	Cricath® Adult	Steril	STERILE EO
Produktlogo	The Cricath logo features the word 'cricath' in a lowercase, rounded, orange font. It is flanked by two curved orange arrows that point towards each other, one above and one below the text.	Einmalgebrauch	A circular icon with a diagonal line through it, indicating that the device is for single use only.
Innendurchmesser	2.0 mm	In Bedienungsanleitung nachschlagen	An icon of an open book with a lowercase 'i' inside, representing a reference to the user manual.
Länge	7 cm	Enthält kein Naturkautschuklatex	A circular icon with a diagonal line through it and the word 'Latex' inside, indicating that the product is latex-free.
Produktnummer	REF		

Anwender

Cricath Adult darf nur von medizinischem Personal bzw. unter Anleitung von Personal verwendet werden, das für das Atemungsmanagement geschult ist und praktische Erfahrungen in diesem Bereich hat.

Verwendungszweck

Cricath Adult soll den Zugang zur Luftröhre ermöglichen, wenn eine konventionelle Intubation durch eine Maske und/oder großlumigen Endotrachealtubus bei erwachsenen Patienten nicht durchgeführt werden kann.

Patientengruppe

Erwachsene

Kontraindikationen

Keine bekannt

Mögliche Komplikationen

- Blutung
- Hämatom
- Verrutschen des Katheters
- Gewebeemphysem
- Pneumomediastinum
- Punktion der Speiseröhre

Produktbeschreibung

Cricath Adult ist ein Koniotomie-Katheter mit einer Länge von 7 cm und einem Innendurchmesser von 2.0 mm, der über eine 1.8-mm-Nadel eingeführt wird.

Verpackung

- In der Verpackung sind Cricath Adult sowie eine Spritze und ein Nackenband enthalten.
- Das Gerät ist in einer Peel-Verpackung steril (Ethylenoxid-Sterilisation) verpackt.

Cricath Adult Bedienungsanleitung

- Cricath Adult ist steril, solange die Verpackung unbeschädigt und ungeöffnet ist. Verwenden Sie Cricath Adult nicht, wenn Zweifel an der Unversehrtheit der Verpackung bestehen.
- Das verpackte Produkt muss trocken gelagert werden.
- Vermeiden Sie längere Lichteinwirkung.

Erforderliches Zusatzmaterial

- Steriles Wasser
- Beatmungsgerät mit Luer-Verbindung (männlich), z. B. Ventrain®

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Den Cricath Adult nur mit Geräten verwenden, die für die Anwendung mit kleinumigen Kathetern geeignet sind, wie z. B. Ventrain. Dies sollte anhand des Anleitungshandbuches des Beatmungsgerätes überprüft werden.
- Sichern Sie Cricath Adult während der Verwendung ordnungsgemäß, damit der Katheter in der Luftröhre jederzeit richtig positioniert bleibt.
- Führen Sie die Nadel nicht erneut in den Katheter ein, nachdem sie herausgezogen wurde. Dies könnte die Katheterwand beschädigen oder punktieren.
- Wenn möglich sollte unter aseptischen Bedingungen und Lokalanästhesie gearbeitet werden.

Bedienungsanleitung

- 1 Entfernen Sie den Schutzschlauch vom Katheter, füllen Sie die Spritze mit sterilem Wasser oder Kochsalzlösung und befestigen Sie sie am Katheter.
- 2 Bereiten Sie den vorderen Nacken des Patienten vor.

- 3 Lokalisieren Sie die zwischen Ringknorpel und Schildknorpel liegende Membran durch Abtasten (*Abbildung A und A**).
- 4 Stabilisieren Sie die Luftröhre zwischen Daumen und Zeigefinger.
- 5 Halten Sie den Katheter am transparenten Nadelansatz oder an der mit Wasser gefüllten Spritze.
- 6 Führen Sie den Katheter nach unten ein, indem Sie die Membran mit der Nadelspitze punktieren (*Abbildung A und A**). Beim Eintritt in die Luftröhre kann der Widerstand nachlassen.

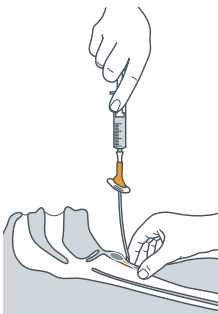


Abbildung A



Krikothyreoidale Membran

Abbildung A*

- 7 Ziehen Sie den Spritzenkolben, um die Katheterposition in der Luftröhre zu sichern (*Abbildung B*). Dabei sollte die Luft abgesaugt werden.
- 8 Schieben Sie den Katheter nun vorsichtig in die Luftröhre, bis der Flansch auf dem Nacken liegt (*Abbildung C*).

Cricath Adult Bedienungsanleitung

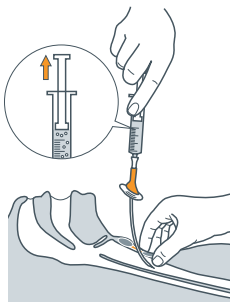


Abbildung B

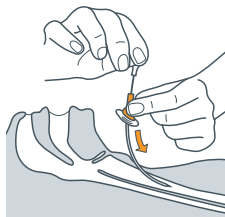


Abbildung C

- 9 Danach sollte die Nadel (*Abbildung D*) entfernt werden. Sobald die Nadel entfernt ist, darf diese nicht wieder in den Katheter eingeführt werden. Dies kann zu Beschädigungen an der Katheterwand führen.
- 10 Befestigen Sie die Spritze am Katheter und saugen Sie erneut Luft ab, um die Position des Katheters zu sichern.
- 11 Sichern Sie den Katheter mit dem bereitgestellten Band oder anderen Hilfsmitteln (*Abbildung E*).



Abbildung D



Abbildung E

- 12** Schließen Sie ein geeignetes Beatmungsgerät (z. B. Ventrain) an den Katheter an (*Abbildung F*).

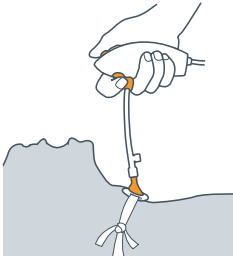


Abbildung F



EN Instructions for use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **www.ventinovamedical.com** NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult
Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult



IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com