



ung **FR** Mode d'emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath®
Cricath® Adult **TR** Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for
emploi de Cricath® Adult **IT** Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebrui-
Cricath® Adult kullanma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult
ult **IT** Istruzioni **NL** Gebruiksaanstructie Cricath® Adult instructie Cricath®
nma talimatları **EN** Instructions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult
l'uso di Cricath® Adult **NL** Gebruiksaanstructie Cricath® Adult **PT** Instruções
structions for use Cricath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR**
NL Gebruiksaanstructie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath®
ath® Adult **DE** Cricath® Adult Bedienungsanleitung **FR** Mode d'emploi de
ctie Cricath® Adult **PT** Instruções de utilização Cricath® Adult **TR** Cricath®

Gebruiksaanwijzing Cricath Adult

Naam International Emergency Services S.L.



Productnaam	Cricath® Adult	Steriel	STERILE EO
Product logo		Eenmalig gebruik	
ID = binnendiameter	2.0 mm	Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen	
Lengte	7 cm	Bevat geen natuurlijke latex rubbers	
Product nummer	REF		

Gebruiker

Cricath Adult dient gebruikt te worden door, of onder toezicht van, medisch personeel dat getraind is en ervaring heeft met beademing.

Beoogd gebruik

Cricath Adult is bedoeld voor het toegang krijgen tot de trachea wanneer conventionele intubatie door middel van een masker of endotracheale buis niet mogelijk is.

Patiëntengroep

Volwassenen

Contra-indicaties

Onbekend

Mogelijke complicaties

- Bloeding
- Hematomen
- Dislocatie van de katheter
- Emfyseem van het weefsel
- Pneumomediastinum
- Oesofageale punctie

Productbeschrijving

Cricath Adult is een transtracheale katheter met een lengte van 7 cm en een binnendiameter van 2.0 mm, ingebracht over een 1.8 mm naald.

Verpakking

- De verpakking bevat Cricath Adult inclusief een spuit en een nekband.
- Het product is verpakt in een eenvoudig open te trekken verpakking, gesteriliseerd met ethyleenoxide.

Gebruiksaanwijzing Cricath Adult

- Cricath Adult is steriel zolang de verpakking niet geopend of beschadigd is. Gebruik Cricath niet indien er twijfel bestaat over de integriteit van de verpakking.
- Bewaar het verpakte product op een droge plaats.
- Vermijd langdurige blootstelling aan licht.

Benodigd extra materiaal

- Steriel water
- Beademingsapparaat met een male Luer connector (bijv. Ventrain®)


Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Gebruik Cricath Adult alleen in combinatie met een beademingsapparaat dat geschikt is voor gebruik in combinatie met een katheter met smalle diameter.
- Bevestig Cricath Adult stevig tijdens gebruik om de katheter ten alle tijde in de juiste positie in de trachea te houden. Dislocatie van Cricath Adult in de luchtweg kan subcutaan emfyseem veroorzaken.
- De naald mag niet opnieuw in de katheter worden aangebracht als de naald daar eenmaal uit verwijderd is, omdat anders de wand van de katheter kan worden beschadigd of gepuncteerd.
- Wanneer dit mogelijk en van toepassing is, dienen aseptische technieken en lokale anesthesie bij deze procedure te worden toegepast.

Gebruiksaanwijzingen

- 1 Verwijder de beschermhuls van de katheter, vul de spuit met steriel water of een zoutoplossing en bevestig deze aan de katheter.
- 2 Maak de hals van de patient gereed.

- 3 Identificeer het cricothyroïdeuze membraan tussen de cartilago cricoïdea en de cartilago thyroïdea door middel van palpatie (*Figuur A en A**).
- 4 Stabiliseer de trachea tussen duim en wijsvinger.
- 5 Houd de katheter vast aan de transparante hub van de naald of aan de met water gevulde spuit.
- 6 Breng de katheter in caudale richting in door met de katheter-tip (*Figuur A and A**) het cricoid membraan aan te prikken. Op het moment van entree in de trachea neemt de weerstand af.

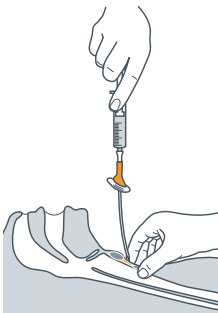

Figuur A




Cricothyroid membraan


*Figuur A**

- 7 Trek de plunjer van de spuit terug om zo de juiste positie van de naald te bevestigen (*Figuur B*). Er moet lucht worden aangezogen.
- 8 Schuif alleen de katheter caudaal op tot de flange op de hals rust (*Figuur C*).

Gebruiksaanwijzing Cricath Adult

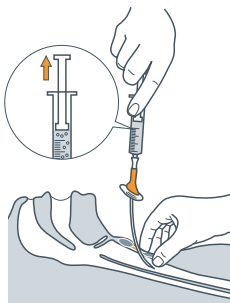

Figuur B

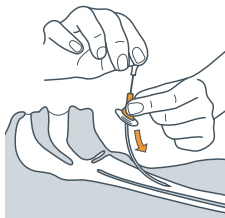

Figuur C

- 9** Verwijder de naald (Figuur D). De naald mag niet opnieuw in de katheter worden aangebracht als de naald daar eenmaal uit verwijderd is, omdat anders de wand van de katheter kan worden gepuncteerd.
- 10** Maak de spuit nu vast aan de katheter en aspireer opnieuw om te bevestigen dat de katheter goed gepositioneerd is.
- 11** Zet de katheter vast met de bijgevoegde nekband of op een andere manier (Figuur E).




Figuur D



Figuur E

- 12** Sluit een passend beademingsapparaat (bijv. Ventrain) aan op de katheter (*Figuur F*).

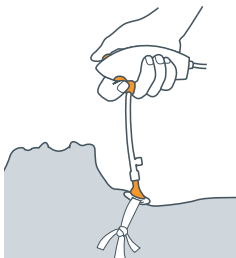

Figuur F



EN Instructions for use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung
Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult
use Cricath® Adult DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult
ksinstructie Cricath® Adult PT Instruções de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları
DE Cricath® Adult Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult **www.ventinovamedical.com** NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult
Bedienungsanleitung FR Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
de utilização Cricath® Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Mode d'emploi de Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult
Adult TR Cricath® Adult kullanma talimatları EN Instructions for use Cricath® Adult
Cricath® Adult IT Istruzioni per l'uso di Cricath® Adult NL Gebruiksaanwijzing Cricath® Adult



IES MEDICAL®

Bizkaia Science and Technology Park
Ibaizabal Street, Building 500
48160 Derio (Bizkaia), Spain

T +34 94 400 88 47
info@ventinovamedical.com